

JINS MAGNET 取扱説明書

注意事項

- ご使用前に、よくお読みいただき、正しくご使用ください。※裏面の文書も必ずお読みください。
- お読みになったあとは保存し、わからないときに再読してください。

ご使用前に

ご使用のたびに金属片(針やピンなど)が付着していないか確認する。
(鋭利な金属片が付着したまま装着すると、けがをするおそれがあります。)


お願い

1. 次のような使用はしないでください。(劣化や変色の原因となります。)
① クリーム、スプレー、シブなどの薬剤との併用
② 入浴剤を入れた風呂への入浴 ③ 温泉浴 ④ 海水浴
2. 強く引っ張らないでください。
3. 使用目的以外の用途に使用しないでください。
4. こりの症状が改善したら、とりはずしてください。


ご使用方法

下の説明に従って、着脱および長さ調節を行ってください。


取り付け方

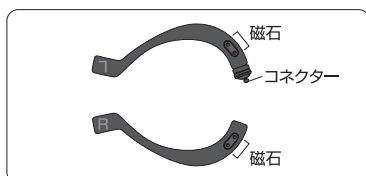


①と⑧を確認して、磁石が肌に直接触れる向きになるように左右を取り付ける。

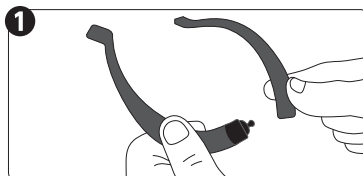


片側のバンドをコネクタからはずす。

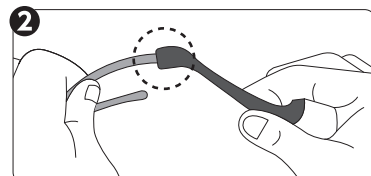


バンドをメガネの耳あて部に取り付ける。
※磁石(突起)がある方を首側に向ける

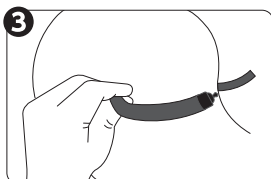


メガネとバンドの接合部付近を両手で持ち、頭にかける。
※すこしメガネを広げてかけてください

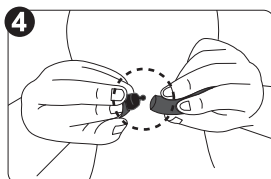

頭に掛けたら、首の後ろでバンドをコネクタで繋ぐ。

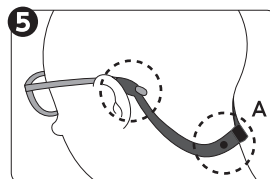


Aの箇所磁石(突起)面が当たるように、取り付け位置を調節する。

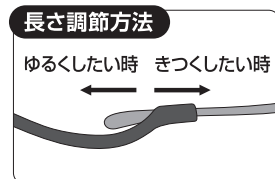


長さ調節の際は、メガネをはずすように、取り付け位置を調節する。
た状態で行ってください。

取りはずし方

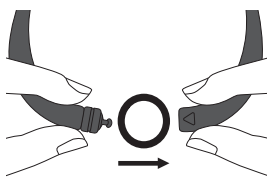


→の方へ引っ張ってはずす。

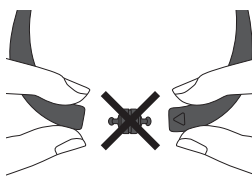


コネクタ部分を無理にはずさないでください。

メガネ適合サイズ

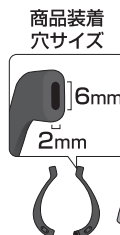

商品装着
穴サイズ

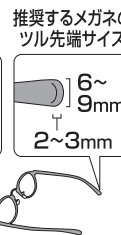

推奨するメガネの
ツル先端サイズ

推奨サイズよりも細いツルに取り付ける場合は、使用時や掛け外しの際にメガネが外れて落下する可能性がありますのでご注意ください。
推奨サイズよりも太いツルに無理に取り付けることは、破損の原因となりますのでおやめください。
ツルの形状や素材によっては取り付けられない場合があります。

お手入れ方法

まめに水、またはぬるま湯で洗い流してください。石けんや洗剤での洗浄は劣化の原因となります。また、お手入れをしないままでのご使用は、汗や皮脂による黄変や臭気の原因となります。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害が発生するおそれがあります。
※物的損害とは家屋・家財および家畜・ペット等の物に関わる損害をいいます。

1. 首筋に湿疹や傷がある場合は使用しない。(症状が悪化するおそれがあります。)
2. 使用中皮膚や体調に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談する。
3. 伸びや膨らみなどの異変を感じたら、使用を中止する。
4. サウナなど、高温になる場所で使用しない。
5. 火気のそばに置かない。(変形の原因になります。また引火すると有毒ガスが発生するおそれがあります。)

機械器具 81 磁気治療器

管理医療機器 家庭用永久磁石磁気治療器(71016000)

ジンズマグネプラス

【禁忌・禁止】

心臓ペースメーカー等植込型医用電子機器または脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの医用電気機器を使用している方は、誤作動を招くおそれがありますので使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成
本体
添付文書



2. 原理

本製品は、線状のシリコンループ内に磁性材を配列し一端に接続留め具(コネクター部)、もう一端にメガネにとりつける差し込み口を備えた、永久磁石による磁気を患部に作用させて治療を行う家庭用永久磁石磁気治療器である。

3. 最大磁束密度

110mT(ミリテスラ)

【使用目的又は効果】

一般家庭での磁気治療に使用する。
装着部位のこり及び血行の改善

【使用方法等】

ご使用にあたっては、説明書をよくお読みになってからご使用ください。また、機器に異常がないか確認してからご使用ください。

1. 使用方法

- (1) 磁気ループ部の差し込み口をメガネに通す。
- (2) メガネをかける。
- (3) コネクターをとめる。

【使用上の注意】

1. 医師の治療を受けている方や下記の方は必ず専門家と相談の上で使ってください。
 - (1) 悪性腫瘍のある方
 - (2) 心臓に障害のある方
 - (3) 妊娠初期の不安定期または出産直後の方
 - (4) 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
 - (5) 皮膚に感染症または創傷のある方
 - (6) 安静を必要とする方

- (7) 体温38℃以上(有熱期)の方

例1. 急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動)の強い時期
例2. 衰弱しているとき

- (8) ねんざ(捻挫)、肉離れなどの急性(とう疼)痛性疾患の方

2. 使用しても効果が現れない場合は医師などの専門家に相談してください。

3. 機器の取り扱いには次のことにご注意ください。

- (1) 他の治療器と同時に使用しないでください。
- (2) 頭部には使用しないでください。
- (3) 機器は改造しないでください。
- (4) 定められた使用方法以外の用途で使用しないでください。

4. 使用する前には次のことにご注意ください。

- (1) 時計、磁気カード、フロッピーディスクなどの磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
- (2) しばらく使用しなかったときには、表面に金属などの異物が吸引付着していないことを確認してください。

5. 使用中には次のことに注意してください。

- (1) 身体に異常を感じたときは、使用を直ちに中止してください。
- (2) 装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れたときは、使用を直ちに中止してください。
- (3) 磁気共鳴画像診断装置(MRI)の検査を受ける方は、検査の前には取りはずしてください。

6. 使用後及び保管には次のことにご注意ください。

- (1) 機器を廃棄するときには、お住まいの市町村の廃棄方法に従ってください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 小児および監督を必要とする方の手の届かない場所に保管してください。

【保守・点検に係る事項】

使用に際し、異物の付着等がないか確認の上で使ってください。常に使用前後の点検を励行し、機器に異常が発見された場合にはすぐに使用を中止してください。

【包装】

1個入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: ピップ株式会社(連絡先: 06-6945-4427)
住 所: 奈良県天理市南六条町182番地(奈良工場)
製造業者: ピップ株式会社
住 所: 大阪市中央区農人橋2丁目1番36号